



维根生物科技有限公司
Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236
E-mail: 253540644@qq.com

Jurkat(E6)-TCR α /β KO+hCD8 α /β 稳转株说明书

一、基本信息

英文名称	Jurkat(E6)-TCR α /β KO+hCD8 α /β polyclonal stable cell line
中文名称	过表达人源 CD8 α /β 的 TCR α /β 敲除 Jurkat(E6) 细胞株
产品货号	VGC-0010B-002SP
基因信息 1	基因名称：人 T 细胞受体 α /β
基因信息 2	基因名称：人 CD8 α /β 双亚基
细胞形态	淋巴母细胞样，悬浮生长
细胞规格	T12.5 细胞瓶复苏细胞或 1×10^6 细胞冻存细胞
细胞株抗性	Puro R（嘌呤霉素抗性）+ Hygromycin B（潮霉素 B 抗性）
细胞株类型	混合稳转（√）；单克隆株（×）
完全培养基	RPMLI-1640 + 10% FBS
培养条件	(1) 气相：95%空气，5% CO ₂ ；(2) 温度：37 °C
传代方法	建议 1：2 ~ 1：3 传代，每 2 ~ 3 天传代或换液一次。
细胞冻存	无血清冻存液（VGA-0046-0100）；- 80 °C 短期保存；液氮长期保存
运输条件	活细胞常温运输或冻存细胞干冰运输



www.vigenbio.com



Technical Support



二、细胞到货处理

1、常温到货细胞

1.1 T25 细胞培养瓶寄送活细胞（细胞处于培养液中）的处理方法：

- a) 观察细胞培养瓶是否完好，培养液是否有漏液、浑浊等现象。若有，请拍照，并及时与技术支持联系。
- b) 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。若因运输问题，部分贴壁细胞从瓶壁脱落,先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2~4 小时，以便稳定细胞状态。
- c) 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。
- d) 仅留适量细胞培养液（弃去多余），然后将细胞置于 37 °C，5% CO₂ 培养箱培养。
- e) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

1.2 冻存管寄送活细胞（细胞处于全血清中）的处理方法：

- a) 用 75%酒精彻底消毒细胞冻存管，然后在超净工作台将细胞悬液转移至 15 mL 无菌离心管，500 g，室温离心 5 min。
- b) 弃血清，用完全培养基重悬细胞沉淀。
- c) 细胞接种于合适的细胞培养皿或培养瓶，然后置于 37 °C，5%CO₂ 培养箱培养。
- d) 次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。
- e) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

2、干冰运输细胞

- a) 将细胞从干冰中取出后立即置于 37 °C 水浴，轻轻转动冻存管，直至管内细胞完全融化（最好在 1~2 min 内解冻）。
- b) 将冻存管转移到超净工作台，用 75% 酒精彻底消毒冻存管。
- c) 将解冻细胞转移到 15 mL 无菌离心管，500 g，室温离心 5 min。
- d) 弃细胞冻存液，用完全培养基重悬细胞沉淀。





e) 将细胞接种于合适的细胞培养皿或培养瓶，然后置于 37 °C，5% CO₂ 培养箱培养。次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。

f) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

三、细胞培养

1、细胞复苏

将含有 1 mL 细胞悬液的冻存管在 37 °C 水浴中快速摇晃至溶解，然后在超净工作台将细胞转移至 15 mL 无菌离心管，加入 4 mL 培养基或无菌 PBS 混合均匀，室温，500 g，离心 5 min，弃上清液，用完全培养基重悬细胞，将细胞移入培养瓶或培养皿培养，第二天更换培养液并检查细胞生长情况。

2、细胞传代

2.1 贴壁细胞传代：当细胞密度约 80% 时，可进行传代培养：

a) 吸出原培养皿中的培养基，PBS 缓冲液润洗细胞两次，加 2 ~ 3 mL 0.25% 胰酶进行消化（注意根据实际情况，把握消化时间）。

b) 镜下观察消化情况，在细胞边缘缩小，贴壁松动时（可用吸管吸起些许胰酶轻轻吹打细胞层某处，即可肉眼可见细胞层脱落，或吹打后镜下观察吹打处，即消化完成，否则继续消化）直接吸掉胰酶，加 3 ~ 4 mL 完全培养基，轻轻吹打细胞层，把细胞层吹落，吹散。

c) 取部分细胞悬液转移至新的培养皿中，添加适当的完全培养基，把细胞悬液打匀，于培养箱中培养。

2.2 悬浮细胞传代：当细胞密度约 80% 时，可进行传代培养：

a) 直接将原培养液和细胞一起转移至 15 mL 或 50 mL 无菌离心管，400~500 g 室温离心 5 min，吸掉培养基，用新鲜完全培养基重悬细胞。

b) 根据细胞生长特性，按合适比例传代细胞，将细胞悬液转移至新的培养皿或培养瓶，将细胞置于 37 °C 培养箱中培养。





维根生物科技有限公司
Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236
E-mail: 253540644@qq.com


3、细胞冻存

收集细胞，500 g，离心 5 min，弃上清液，加入无血清冻存液（VGA-0046-0100）轻轻悬浮细胞，移入冻存管后进行冻存。

四、使用须知

- 1) 本产品仅供购买方单方使用，不得向任何第三方赠送、转让或销售；
- 2) 本产品仅供实验室和体外研究使用，不能用于任何临床检验、诊断、治疗，或任何非法用途；
- 3) 收货 48 h 内如发现异常，请及时联系售后，逾期视为收货良好；
- 4) 请严格按照本说明书操作，否则造成细胞失活等情形，不予提供补发服务。

五、细胞株质检

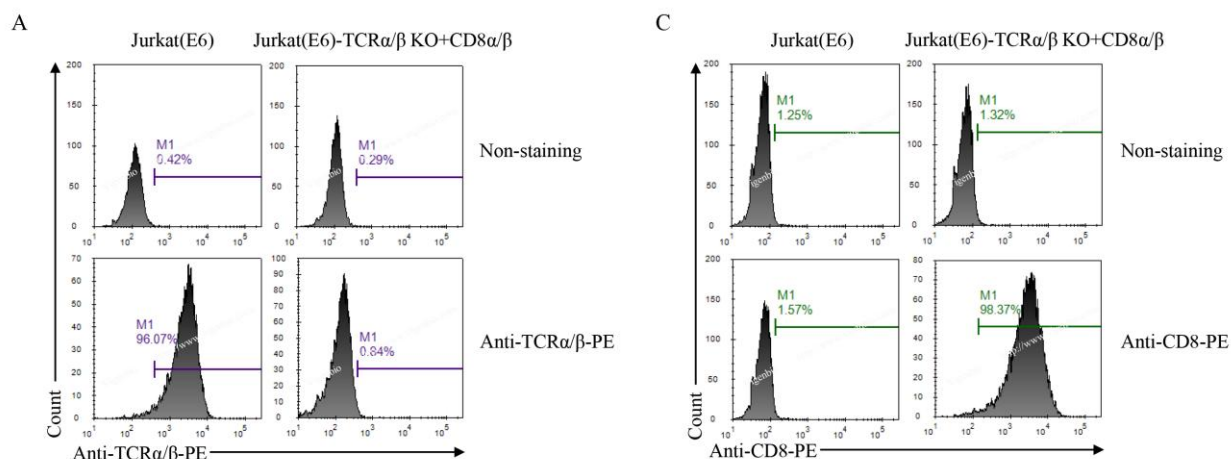

B

BioLegend
From Revvity

Version: 1 Revision Date: 11/30/2012

PE anti-human α/β T Cell Receptor Antibody

Catalog# / Size 306707 / 25 tests
306708 / 100 tests

Clone IP26

Regulatory Status RUO

Other Names α/β TCR, TCR α/β

Isotype Mouse IgG1, κ

Description The IP26 antibody reacts with a monomorphic determinant of the α/β T-cell receptor, which is expressed on greater than 95% of normal peripheral blood CD3⁺ T cells. The α/β TCR recognizes a peptide bound to MHC leading to T-cell activation.

D

BioLegend
From Revvity

Version: 4 Revision Date: 07/13/2015

PE anti-human CD8 Antibody

Catalog# / Size 344705 / 25 tests
344706 / 100 tests

Clone SK1

Regulatory Status RUO

Other Names T8, Leu2

Isotype Mouse IgG1, κ

Description CD8 is a 32-34 kD type I glycoprotein. It forms a homodimer (CD8αα) or heterodimer (CD8αβ) with CD8β. CD8, also known as T8 and Leu2, is a member of the immunoglobulin superfamily found on the majority of thymocytes, a subset of peripheral blood T cells, and NK cells (which express almost exclusively CD8α homodimers). CD8 acts as a co-receptor with MHC class I-restricted T cell receptors in antigen recognition and T cell activation and has been shown to play a role in thymic differentiation. Two domains in CD8α are important for function: the extracellular IgSF domain binds the α₃ domain of MHC class I and the cytoplasmic CXXP motif binds the tyrosine kinase p56 Lck.

Fig.1. Jurkat(E6)-TCRα/β KO+CD8α/β 稳转株 COA

A、PE检测细胞株TCRα/β表达；B、TCRα/β抗体信息；C、PE检测细胞株CD8表达；D、CD8抗体信息。



www.vigenbio.com



Technical Support